




Rack IsoFreeze MCT a viraggio colore verde/giallo 7°. Posti 24 x 0.5-1.5 o 2.0ml

Cf.1pz. Rack IsoFreeze MCT a viraggio colore verde/giallo 7°. Posti 24 x 0.5-1.5 o 2.0ml

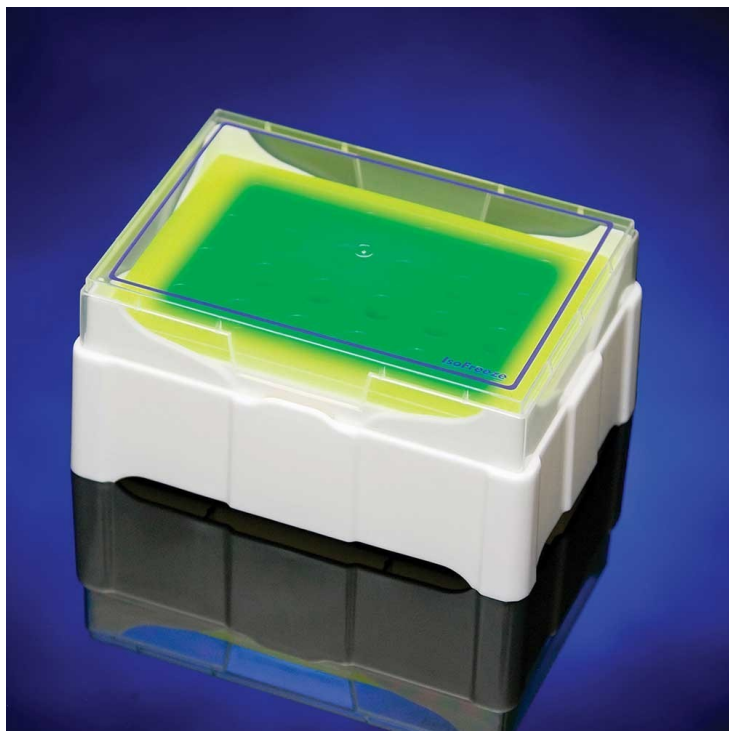

Product codes:

Reference: 13 896 012

Product gallery:

Product description:

Rack a viraggio di colore al cambiamento di temperatura per 24 microtubi da 0.5 a 2.0ml. Completati di coperchio.

Posizionabile sul bancone da laboratorio e grazie al gel in essi contenuto preservano i campioni a temperatura e il cambio di colore che avviene a 7°C indica il rischio di riscaldamento degli stessi. I rack sono in grado di mantenere la temperatura per circa 3 ore ed eliminano così la necessità di contenitori di ghiaccio.

A temperatura ambiente il rack è di colore giallo, posto nel freezer diviene di colore verde. Una volta congelato può essere utilizzato nel bancone per la preparazione dei campioni, quando vira al giallo indica il riscaldamento e quindi la necessità di essere nuovamente congelato. Può essere congelato e scongelato molte volte

CARATTERISTICHE

-Mantiene la temperatura a 4°C per quasi 4 ore (con coperchio sul rack) quando è a temperatura



ambiente

- Il rack subisce un cambio di colore a 7°C
- Capacita' rack: 24 microtubi
- Compatibile microtubi 0.5 / 1.5 / 2.0ml
- Colore: giallo sopra 7°C - verde sotto i 7°C

Product features:

RCK - BESONDERHEIT: rack per mantenimento temperatura dei campioni e viraggio colore sopra i 7°C

RCK - TYP: workstation

RCK - TYP: box

RCK - TYP: aufrechterhaltung der temperatur

RCK - ABDECKUNG: dieser

RCK - PLÄTZE: 24

RCK - FORM: rechteckig

RCK - GRÖßE: 145x114x70mm

RCK - HÖHE: 70mm

RCK - MATERIAL: gemischte

RCK - STAPELBAR: nd

RCK - SEITIG VERWENDBAR: 1

RCK - TEMPERATURBEREICH: da -20°C a +7°C

RCK - TEMPERATUR MAX: nd

RCK - MINIMALE TEMPERATUR: -20°C

RCK - RASTER ALPHANUMERISCHE: nd

RCK - BEREICH BESCHREIBBAR: nd

RCK - AUTOKLAVIERBAR: nein

RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi 1.5 ml

RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi 2.0 ml

RCK - KOMPATIBEL MIT: microtubi 0.5 ml

RCK - GEEIGNET FÜR: lagerung

RCK - GEEIGNET FÜR: vorbereitung der proben