



# Rack per microtubi ChillBlock SBS a 60 posti combinati da 1.5/2.0ml e 0.2ml


Cf. 1pz. Rack per microtubi ChillBlock SBS 12 posti da 1.5/2.0ml + 48 posti PCR da 0.2ml - raggiungimento e mantenimento tramite ghiaccio - ghiaccio secco - azoto - incubatori, etc. Raggiunge -140°C in 15 minuti. Dim. 128x85x32mm. 1pz

## Codes produits :

Référence 92 896 0253



## Galerie de produits :

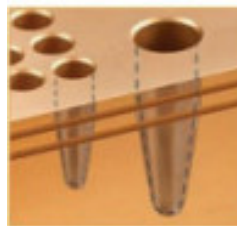

## Description du produit :

Chill Block rack per microtubi conforme agli standard SBS

Il rack ChillBlock conforme come dimensioni agli standard SBS compatibile per il trasferimento veloce con i sistemi automatici

Rack in lega metallica termococonduttiva che elimina le incongruenze che si verificano a causa dell'inserimento di tubi direttamente in ghiaccio, ghiaccio secco, alcool, bagni, bagni d'acqua e altre comuni sorgenti di temperatura da laboratorio.

Posizionando il rack Chill Block nella sorgente di temperatura, si adatterà rapidamente alla temperatura da -150°C fino a +100°C.

Il rack ChillBlock assicura una uniformità di temperatura di più o meno 0.1°C su tutti i tubi quando raffredda, congela o riscalda.

Il rack ChillBlock è disponibile in un vasto range di dimensioni per accogliere provette come microtubi, criotubi -o cryovial-, microtubi per PCR, strip e piastre in formato conforme SBS e provette da 15 e 50ml.



- I pozzetti individuali minimizzano il rischio di contaminazioni tramite acqua o ghiaccio
- Possono essere autoclavati o puliti con disinfettante
- Temperatura uniforme su tutto il rack ChillBlock
- I tubi sono posti in maniera verticale e sono facili da manipolare
- Superficie anodizzata resistente a ruggine, corrosioni e abrasioni

## **APPLICAZIONI**

### **Utilizzo con ghiaccio**

- da temperatura ambiente a 4°C in 60-90 secondi
- campioni ed etichette rimangono asciutti, organizzati e a temperatura uniforme
- ore di raffreddamento senza il contatto diretto del ghiaccio

### **Utilizzo con ghiaccio secco**

- si adatta da temperatura ambiente a -78°C in 5 - 7 minuti
- non necessita di etanolo -risparmio costi e senza rifiuti pericolosi
- uguale o migliore tasso di congelamento comparato ad altri metodi

- da temperatura ambiente a -140°C in 15 minuti

- i campioni sono mantenuti in posizione verticale e organizzati mentre si congelano
- nessun contatto diretto tra campioni e azoto liquido

### **Utilizzo con fonti di calore**

- bagnomaria
- incubatore
- piastra scaldante - stufa

### **Rack ChillBlock per microtubi**

**Il rack per microtubi combinato a 60 posti accoglie 12 microtubi con tappo a pressione o a vite da 1.5/2.0ml e 48 microtubi da 0.2ml individuali o in 6 strip da 8**

### **caractéristiques du produit :**

- RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso con azoto
- RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso su ghiaccio secco
- RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso su ghiaccio
- RCK - TYPE: workstation
- RCK - TYPE: le maintien de la température
- RCK - COUVERTURE: absent
- RCK - LIEUX: 60
- RCK - FORME: rectangulaire
- RCK - TAILLE: 128x85x32h mm
- RCK - HAUTEUR: 32mm
- RCK - MATÉRIEL: Metallo termoconduttivo



RCK - EMPILABLE: pas de  
RCK - VERSO UTILISABLE: 1  
RCK - PLAGE DE TEMPÉRATURE: da -150°C a +100°C  
RCK - TEMPÉRATURE MAX: +100°C  
RCK - TEMPÉRATURE MINIMALE: -150°C  
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: vous  
RCK - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: pas de  
RCK - AUTOCLAVABLE: vous  
RCK - CONFORMITÉ: -  
RCK - ACCESSOIRES INCLUS: -  
RCK - ACCESSOIRES EN OPTION: -  
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 1,5 ml  
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 2.0 ml  
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 0,2 ml  
RCK - ADAPTÉ POUR: utiliser dans un bain d'eau  
RCK - ADAPTÉ POUR: utilizzo in incubatori  
RCK - SUIVI DES: -